

-40℃新世代超低温冷冻储存箱

制冷强劲 · 精确恒温



DW - FL439



制冷系统

无氟环保制冷剂，国际名牌进口压缩机，EBM风机，快速降温，节能环保。



温控系统

高精度微电脑温度控制系统，内置控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度等传感器，确保运行状态安全稳定。



节能环保

搭载DC/DC电源管理模块，节能效率大幅提升；电压控制精度高，电压和整机性能稳定；冗余热量少，杜绝过热安全隐患；



人性化设计

- 优质钢板结构，防腐磷化喷涂，抗腐蚀；ABS抽屉
- 低噪音设计，创造舒适工作环境。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



温控系统

- 高精度微电脑温度控制系统，内置控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度等传感器，确保运行状态安全稳定；
- 1英寸高亮度数码温度显示，温度-20℃~-40℃自由设定，显示精度0.1℃。



制冷系统

- 采用SECOP名牌高效压缩机，国际品牌EBM风扇电机，节能高效、静音。



安全系统

- 完善的声光报警功能：具有高温、低温、环温高、传感器故障、开门、断电报警等多种功能。
- 开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除；
- 专配外挂门把手可外接挂锁，防止随意开启。




人性化设计

- 内部标配7层14个ABS抽屉，每层2个，方便物体分类存放；
- 标配485接口、远程报警接口
- 底部2个调整脚，前后4个滚轮。


适用范围

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品等储存生物制品、疫苗、药品、试剂等适用于药房、制药厂、医院、疾控中心、卫生所、各类实验室等。

性能数据/降温曲线

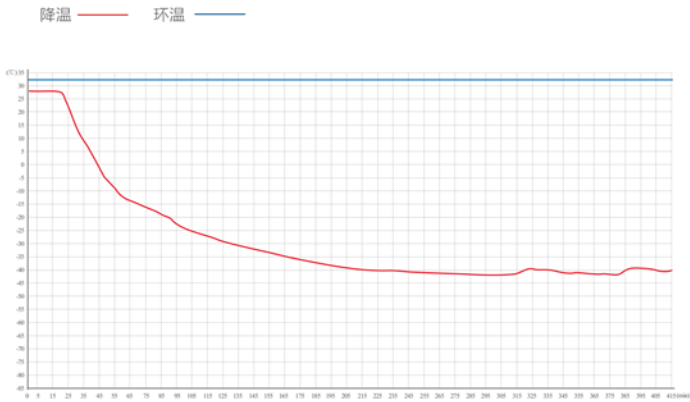

外观尺寸

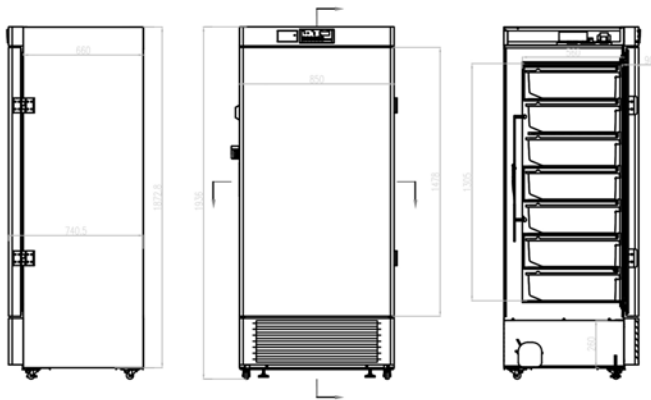

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	功率 (W)	储存温度 (℃)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	搁架/抽屉 (个)	净重 (Kg)
DW-FL439	439	440	-20~-40	850*740*1935	650*560*1305	7/14	175

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。