

-60℃超低温冷冻储存箱

国际名牌压缩机 · 一键快速降温



DW - GW150 / DW-GW270 / DW-GW360

制冷系统

无氟环保制冷剂，国际名牌进口压缩机，EBM风机，快速降温，节能环保。



温控系统

高精度微电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器，温控更精确

人性化设计

优质钢板结构，防腐磷化喷涂，全不锈钢内胆，低噪音设计，创造舒适工作环境。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



温控系统

- 数码温度显示，运行状态一目了然；
- 高精度微电脑温度控制系统，箱体内部温度-30℃~-60℃范围内任意设定。



制冷系统

- 无氟环保制冷剂，名牌全封闭高效压缩机，制冷迅速；
- EBM风机，风力强劲均匀，节能环保；
- 无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好。



安全系统

- 完善的声光报警系统，物品存储更安全；
- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；
- 门体配锁，保证样本存储更安全。




人性化设计

- 上开门设计，门体平衡铰链，开启轻便；
- 浸塑钢丝搁架，耐低温抗腐蚀。
- 箱体采用SPCC钢板静电喷涂，光洁度高；
- 不锈钢内胆，耐低温抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。


适用范围

可用于科学研究，特殊材料的低温试验，冻存血浆、生物材料、疫苗、生物制品、军工产品的耐低温试验等。适用于科研院所、电子行业、化工行业、医院、卫生防疫系统、高校实验室、军工企业等。

性能数据/降温曲线

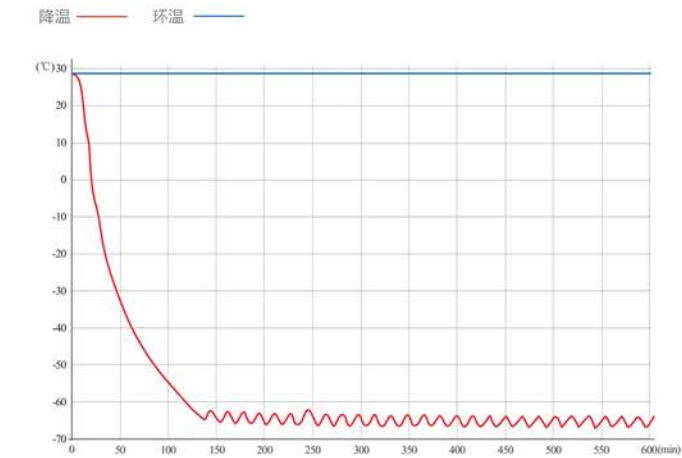

外观尺寸 DW-GW150

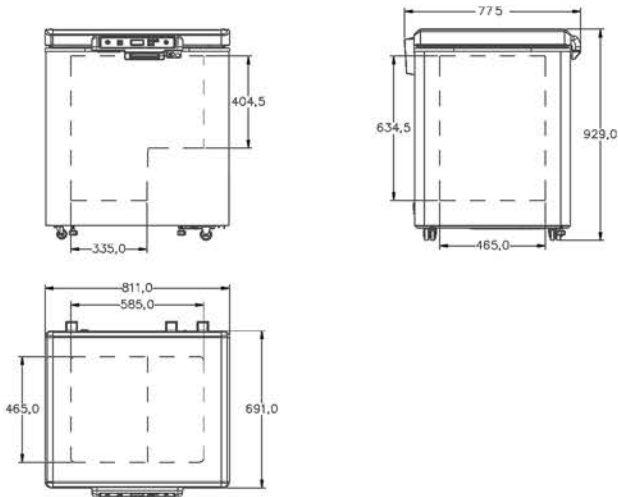

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	额定功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (kg)
DW-GW150	150	330	-30~-60℃	811*775*929	585*465*650.5	62
DW-GW270	270	335	-30~-60℃	1245*775*929	1019*465*650.5	80
DW-GW360	360	364	-30~-60℃	1534*775*929	1308*465*650.5	102.5

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。