

变频节能 双独立制冷系统
全面保障样本安全



DW - HL860



双独立制冷系统

其中一个制冷系统单元出现损坏，不影响另一个制冷系统单元正常使用，依旧维持冰箱-80℃以下长期稳定运行，确保样本存储安全。



变频节能

进口高效变频压缩机+分离式蒸发器+复合式换热器+优化分凝分离系统+高效保温系统，五大节能法宝助力整机功耗降低40%。



多重安全保障

可选配同品牌远程监控，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，可同步短信和微信。运行状态；双锁设计；可选配人脸识别、指纹解锁及NFC刷卡识别多重权限管理。



节能环保

获中国质量认证中心（CQC）颁发的节能和环保认证。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



10英寸电容触控屏

液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息，显示精度0.1℃，控温精度0.1℃。
适用范围-40~-86℃；
可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板等功能。



节能环保

进口高效变频压缩机+分离式蒸发器+复合式换热器+优化冷凝分离系统+高效保温系统，五大节能法宝助力整机功耗降低40%。



双独立制冷系统

其中一个制冷系统单元出现损坏，不影响另一个制冷系统单元正常使用，依旧维持冰箱-80℃长期稳定运行，确保样本存储安全。



标配&选配

选配5V冷链供电系统，可为第三方监控设备供电；
选配RS485数据接口，实现数据通讯；
可选配冻存架/冻存盒；可选配二氧化碳后备系统。



数据存储

USB数据存储功能：可存储相关运行数据，可通过下载查询记录，保证样本存储更加安全可靠。



立体保温

采用高性能VIP真空绝热材料+整体发泡，VIP厚度≥20mm，四个发泡内门，双层发泡保温外门，外门4层密封，整机共计6层门封，大幅提升保温效果。



全方位样本安全保障

完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等14种声光报警方式）；
箱体自带门锁，可接外挂锁，可选配电磁锁、人脸识别、指纹识别、刷卡识别。




- 镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便；
- 万向脚轮+固定脚设计，移动、固定更方便。


适用范围

适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院校、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。

性能数据/降温曲线

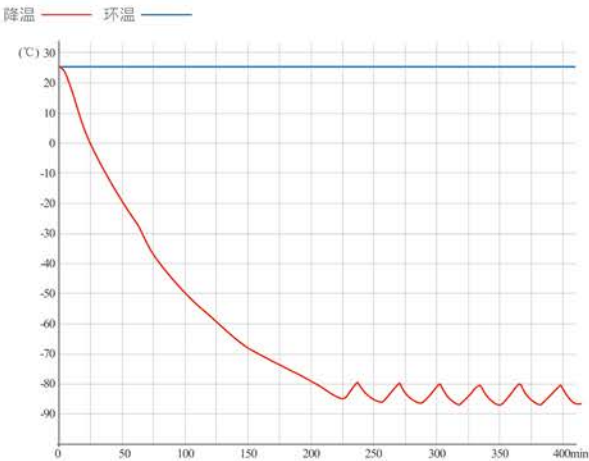

外观尺寸

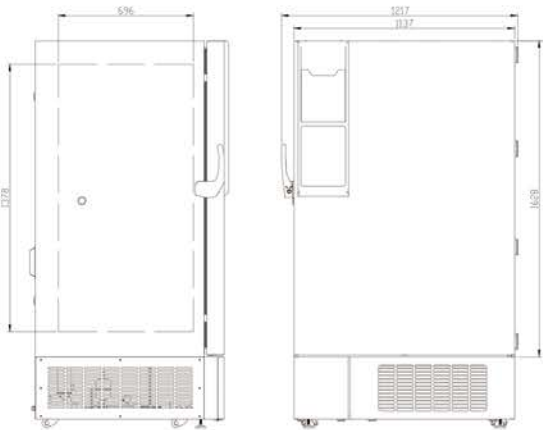

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	运行功率 (W)	储存温度 (℃)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (Kg)	冻存架 (型号及数量)	2英寸冻存盒 (个)	2ml冻存管 (个)
DW-HL860	860	507	-40~-86℃	1217*1025*2005	877*696*1378	390	ZKL304-552B-CT 24组	5*5*24=600	60000

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。

* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。