

-86°C超低温冷冻储存箱

靶向制冷 · 制冷迅速 · 节能环保

荣获国家科学技术发明二等奖



DW-HW138 / DW-HW328 / DW-HW668



精准控温 安全存储

高精度微电脑控制系统，铂电阻温度传感器，控温更精确，箱体内温度-40~-86°C范围内任意设定。



完善的声光报警系统

高低温、开门、断电、电压异常、传感器故障、电池电量低、冷凝器散热差、系统故障等，物品存储更安全。



制冷系统

无氟环保制冷剂，国际名牌高效压缩机，节能高效；
无CFC聚氨酯发泡，超厚保温层，VIP保温板，大幅提升保温效果。



DW-HW138



官方网站



官方微信

MELNG 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



高精度温控系统

- 数码温度显示，可同时显示箱内温度、电源电压、环境温度等参数，运行状态一目了然；
- 高精度微电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器，箱体内温度-40~-86℃范围内任意设定，控温精度0.1℃。



制冷系统

- 无氟环保制冷剂，国际名牌压缩机，节能高效。



保温系统

- 双层发泡保温门，内外门均设门封条，多专利外门系统保温设计，有效阻止冷量流失；
- 无CFC聚氨酯发泡，超厚保温层，VIP真空保温板，大幅提升保温效果。



(DW-HW138)



安全系统

- 完善的报警系统：具有高低温、开门、断电、电压异常、传感器故障、电池电量低、冷凝器散热差、系统故障等多种报警功能；
- 开机延时和停机间隔保护，确保运行可靠；
- 键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。




人性化设计

- 门体平衡铰链，开启轻便；
- 304不锈钢内胆，耐低温抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便；
- 万向脚轮+固定脚设计，移动、固定更方便。


适用范围

适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院校、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。

性能数据/降温曲线 (DW-HW668)

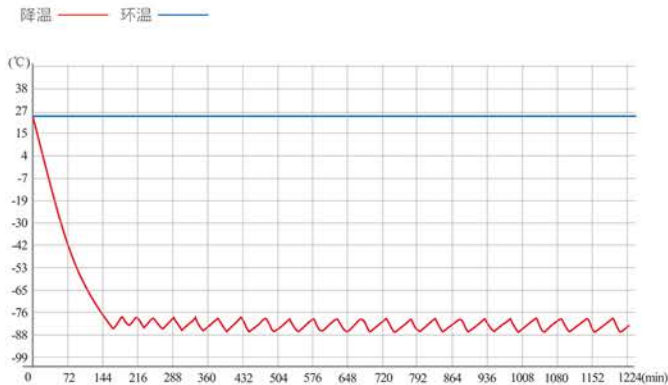

外观尺寸 (DW-HW668)

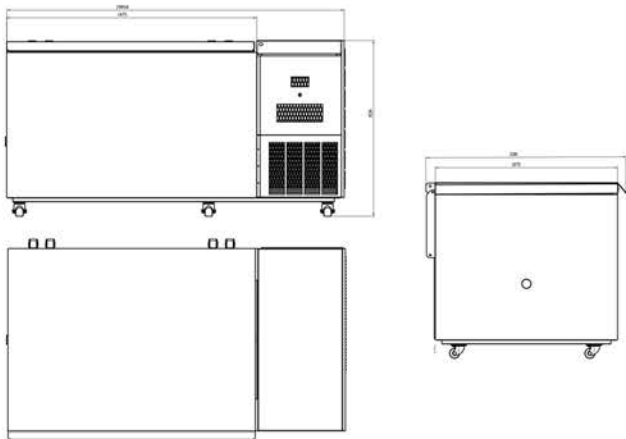

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	运行功率 (W)	储存温度 (℃)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (Kg)	冻存架 (型号及数量)	2英寸冻存盒 (个)	2ml冻存管 (个)
DW-HW138	138	230	-40~-86℃	1320*890*1009	490*470*580	200	ZKW304-10-2: 9组	90	9000
DW-HW328	328	360	-40~-86℃	2005*890*1009	1200*470*570	280	ZKW304-10-2: 24组	240	24000
DW-HW668	668	560	-40~-86℃	2033*1190*1037	1200*815*610	330	ZKW304-10-2: 40组	400	40000

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。