

-25℃医用低温箱

性能稳定 · 品质过硬



DW-YL1008

❄️ 高效制冷

名牌高效压缩机，国际品牌风扇电机，大面积翅片式冷凝器，节能高效、静音。



精准控温 安全存储

高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃。



完善的声光报警系统

高/低温报警、环境高温报警、冷凝器高温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、显示板通信故障报警、记录仪通信故障（选配记录仪）等多重保障，全面保障样本安全。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



温控系统

2英寸高亮度数码温度显示，温度-10℃～-25℃自由设定，显示精度0.1℃。高精度微电脑温度控制系统，内置内部温度、控制/报警温度传感器，确保运行状态安全稳定。



制冷系统

进口高效压缩机，动力强劲；进口低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm，散热面积大，效果好。



配件&耗材

可存储2英寸标准冻存盒770个，2ml标准冻存管77000支。
可选配远程通讯集中监控系统，液氮/二氧化碳后备系统。
可选配温度记录打印机、485接口、远程报警接口。



完善的声光报警系统

高温报警H1、低温报警L1、环境高温报警H2、冷凝器高温报警H3、开门报警do、断电报警PF、电池电量低报警BL、电池电量检测电路故障Eb、控制/报警传感器故障报警E1、环境温度传感器故障报警E3、冷凝传感器故障报警E4、显示板通信故障报警EE、记录仪通信故障Er、记录仪未启动报警LoF等，物品存储更安全。



真空保温

采用高性能VIP真空绝热材料，大幅提升保温效果。发泡保温门，多专利外门保温设计，有效阻止冷量流失；存取物品温度回升小。


人性化设计

自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。
2个温度测试孔，方便测试温度。
标配USB数据导出接口，最大存储100000条，最大存储时限2年。
蓄电池可提供不少于24小时报警并为温度记录打印机、USB端口供电。


适用范围

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品等储存生物制品、疫苗、药品、试剂等适用于药房、制药厂、医院、疾控中心、卫生所、各类实验室等。

性能数据/降温曲线

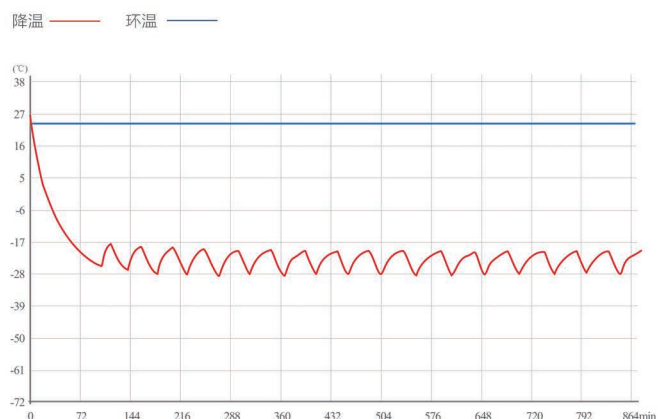

外观尺寸

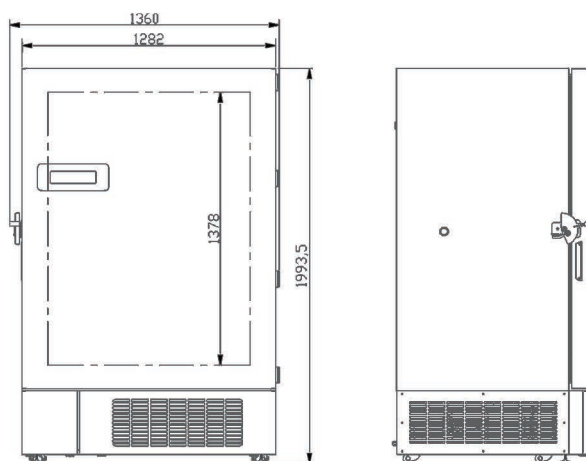

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (Kg)
DW-YL1008	1008	1050	-10~-25℃	1360*1005*1980	1022*696*1378	320

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。

* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。