

-25℃医用低温箱

性能稳定 · 品质过硬



DW - YL270



制冷系统

- 无氟环保制冷剂，名牌全封闭高效压缩机，制冷迅速；
- 内置冷凝器，温度稳定，系统可靠。



温度控制

高精度电脑温控系统，箱体内温度-10~-25℃可调。



安全系统

- 完善的声光报警系统（传感器故障、高低温报警等），物品存储更安全；
- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠。



人性化设计

内嵌式双门封条，防尘且方便清洗。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



高精度温控系统

- 数码温度显示，箱体内部温度-10℃~-25℃范围内任意设定；
- 高精度微电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器，温控更精确。



制冷系统

- 采用进口品牌高效压缩机，节能、高效静音；
- 自主知识产权的制冷回路技术，高效稳定。



- 7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。



保温系统

- 双层发泡保温门(发泡层厚度为100mm)，有效阻止冷量流失；
- 箱体采用无CFC聚氨酯材料，大幅提升保温效果。



安全系统

- 完善的声光报警系统，物品存储更安全；
- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；
- 门体配锁，保证样本存储更安全。




- 标配测试孔，方便监测箱内温度。
- 箱内温度均匀性≤3℃，提供注册检验报告。


适用范围

可用于科学研究，特殊材料的低温试验，冻存血浆、生物材料、疫苗、生物制品、军工产品的耐低温试验等。适用于科研院所、电子行业、化工行业、医院、卫生防疫系统、高校实验室、军工企业等。

性能数据/降温曲线

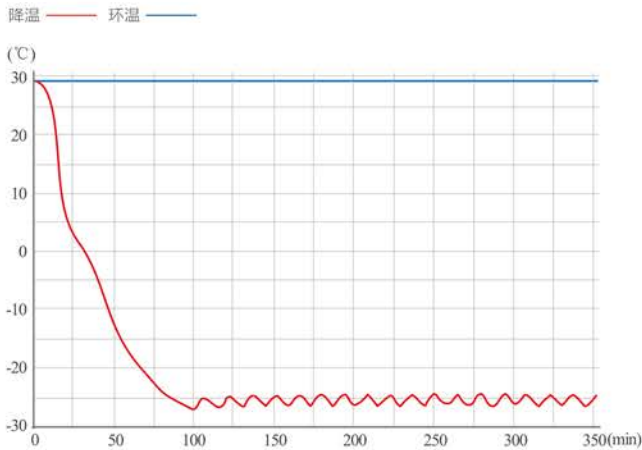

外观尺寸

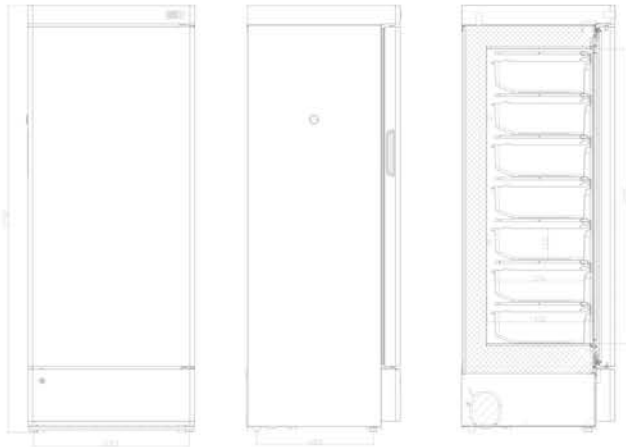

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	额定功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (Kg)
DW-YL270	270	135	-10~-25℃	700*640*1792	500*460*1235	87

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。