

-25℃医用低温箱

性能稳定 · 品质过硬



DW - YW110A



制冷系统

- 无氟环保制冷剂，名牌全封闭高效压缩机，制冷迅速；
- 底置冷凝器，温度稳定，系统可靠。



温度控制

高精度电脑温控系统，箱体内温度-10~-25℃可调。



安全系统

- 完善的声光报警系统（传感器故障、高低温报警等），物品存储更安全；
- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠。



人性化设计

内嵌气囊式门封条，防尘且方便清洗。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



制冷系统

- 无氟环保制冷剂，名牌全封闭高效压缩机，制冷迅速；
- 底置冷凝器，温度稳定，系统可靠；
- 无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好。



温控系统

- 数码温度显示，运行状态一目了然；
- 高精度微电脑温度控制系统，箱体温度-10℃~-25℃范围内任意设定。



安全系统

- 完善的声光报警系统，物品存储更安全；
- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；
- 门体配锁，保证样本存储更安全。




人性化设计

- 上开门设计，门体平衡铰链，开启轻便；
- 内置搁物架，置物更方便。


适用范围

可用于冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、卫生所、卫生防疫系统、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。

性能数据/降温曲线

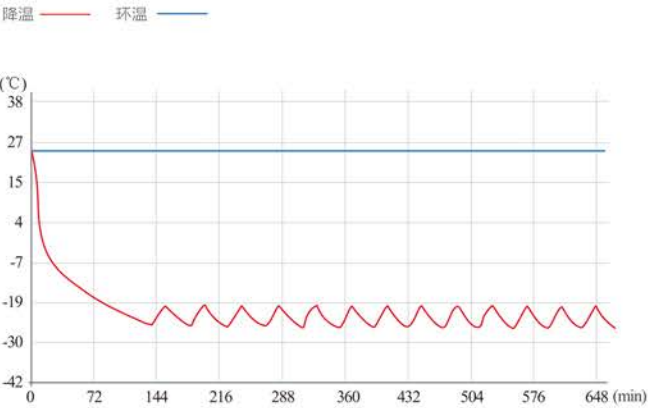

外观尺寸

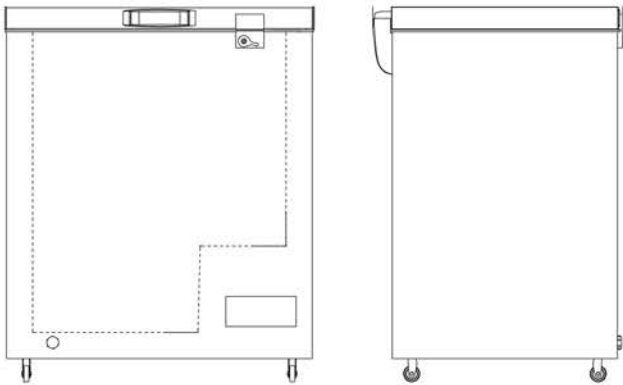

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (Kg)
DW-YW110A	110	64	-10 ~ -25℃	760*570*830	625*360*675	28

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。