

-25℃医用低温箱

性能稳定 · 品质过硬



DW - YW196A / YW226A / YW358A / YW508A



制冷系统

- 无氟环保制冷剂，名牌全封闭高效压缩机，制冷迅速；
- 底置冷凝器，温度稳定，系统可靠。



温度控制

高精度电脑温控系统，箱体温度-10~-25℃可调。



安全系统

- 完善的声光报警系统（传感器故障、高低温报警等），物品存储更安全；
- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠。



人性化设计

内嵌气囊式门封条，防尘且方便清洗。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



制冷系统

- 压缩机：名牌压缩机，节能高效静音；
- 无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染；
- 无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。



温控系统

- 高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体温度-10℃--25℃范围内任意设定，控温精度1℃。



安全系统

- 高低温报警、传感器故障报警、超量程报警等多重保障，全面保障样本安全；
- 开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；
- 安全门锁设计，防止随意开启。




人性化设计

- 隐藏式门把手，平衡铰链设计，内置两个吊篮；
- 底部设有排水孔；
- 底部配置万向脚轮+定向脚轮，方便移动。


适用范围

可用于冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。

性能数据/降温曲线

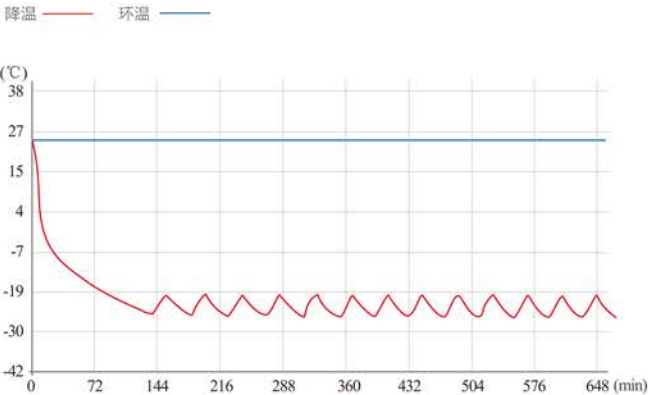

外观尺寸

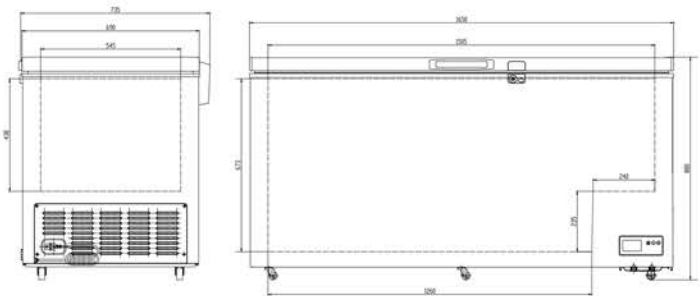

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	功率 (W)	储存温度 (℃)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重/毛重 (Kg)
DW-YW196A	196	71	-10~-25℃	980*560*880	844*385*675	37/40
DW-YW226A	226	109	-10~-25℃	1115*610*890	954*410*703	50/55
DW-YW358A	358	104	-10~-25℃	1350*735*880	1220*545*673	59/69
DW-YW508A	508	203	-10~-25℃	1650*735*880	1504*545*673	74/84

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。