

2~8℃医用冰衬冰箱

智控恒温 · 多重报警更安全



YC-150XEW



宽气候带设计

满足高环温使用（适合10~43℃环境使用）；



预冷功能

获悉断电时间后，设置断电时间，可在断电前为箱体储存足够的冷量，避免压缩机即将启动时断电，完美解决运输前冷量储存极难最大化的问题，该参数每次设置可使用一次；



安全系统

- 具有高温、低温、断电、电池电量低、传感器故障等多种报警功能，全面保障样本安全；
- 设有电源通断功能键。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



高精度温控系统

- 4位高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，内置NTC温度传感器，采用显示温度与控制温度交互分区控制，保证箱体内温度在2℃~8℃范围内；
- 显示精度0.1℃。



制冷系统

- 采用名牌高效压缩机，节能高效、静音；
- 无氟环保制冷剂R600a，稳定可靠。



人性化设计

- 采用一体式把手，把手和显示界面合并，带童锁，方便观察、开门、功能选择；
- 门体缓冲铰链，关门噪音小；
- 箱侧定向轮，箱体左侧万向轮，前部2个调整脚，提高移动性能、地面适应性；
- 可选配特制上下提拉式吊框，有效提高物品取放效率；
- 选配USB导出功能。



安全系统

- 具有高温、低温、断电、电池电量低、传感器故障等多种报警功能，全面保障样本安全。



保温系统

- 箱体发泡层厚度110mm，门体发泡层厚度100mm，提高产品保温性能；
- 门内衬与箱体口框锁冷设计，斜面部分与箱体口框间隙3.9mm，提高产品保温性能；
- 无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。




长效保温

- 断电后，在32℃环温下产品空载保温时间≥55h，在43℃环温下产品空载保温时间≥30.4h；
- 电池采用防碰撞开关，2Ah超大电量，断电>50h内可显示箱内温度及报警。


适用范围

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品等储存生物制品、疫苗、药品、试剂等适用于药房、制药厂、医院、疾控中心、卫生所、各类实验室等。

性能数据/降温曲线

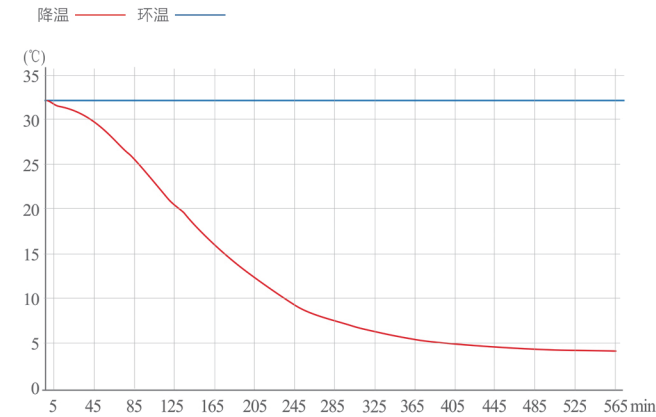

外观尺寸

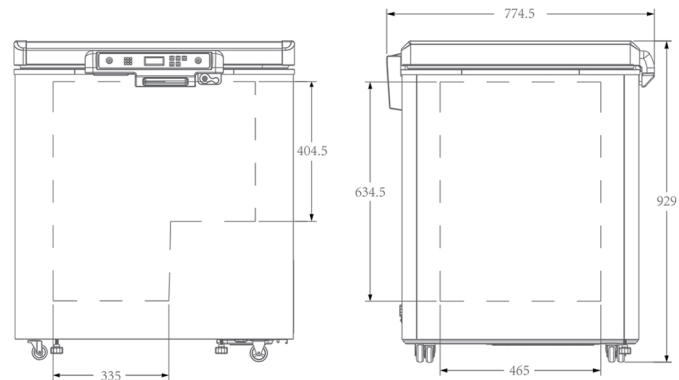

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (Kg)
YC-150XEW	150	148	2~8℃	811*775*929	585*465*651 (曲底335*465*650.5 + 250*465*420.5)	64

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。