

2~8℃防爆冰箱

国际标准 · 智护安全

获得国标Ex d(ib)mb IIB T4高等级认证



YC-360EL

全面防静电

箱壳与内衬、门壳及门内衬均采用铜绞线连接，存储空间内各活动部件均为金属制作。

多种防爆方式

整机防爆，采用隔爆型、本质安全型及浇封型三种防爆方式。

不锈钢内胆

SUS 304不锈钢内胆，耐腐蚀、易清洗。

国家防爆认证

中国国家防爆认证，防爆等级：Ex d(ib)mb IIB T4，可用于1区、2区。

1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也只是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址：www.zkmeiling.com



微电脑温控系统

- 高精度微电脑温度控制系统，内置带有安全栅的PT100传感器，确保运行状态安全稳定。
- 高亮度数码显示屏，视觉更柔和，箱内温度保持在2~8℃范围内，显示精度0.1℃。

全面防爆

- 全面的防静电技术，箱壳与内衬、门壳及门内衬均采用铜绞线连接，存储空间内各活动部件均为金属制作；
- 采用隔爆型、本质安全型及浇封型三种防爆方式；
- 采用贴片式冷凝器，散热性能稳定，极大的减少了灰尘等对散热的影响。




安全系统

- 箱内风机循环，配合风道内循环，保证箱内温度性能；
- 背置2个防撞板，为冰箱散热提供足够空间。



全家族式外观

- 家族式外观，全新配色，整机人体工程布局，使用操作便捷轻松；
- 发泡门体，带门锁，防止门体随意打开，门体配备金属把手，手感舒适。

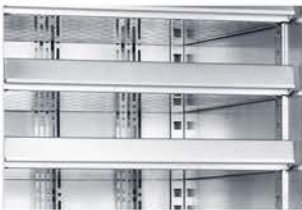


人性化设计

- 主体钣金打造，箱内全304不锈钢，易清洗、耐腐蚀；
- 5层可抽拉搁架，可根据需要调整搁架高度位置及数量，搁架止挡设计，可防止搁架意外抽出跌落。
- 箱内底部2层大空间止挡抽屉，满足大容积物品的放置需求。


适用范围

用于储存易燃、易爆、易蒸发、易腐蚀等化学试剂、实验试剂等，适用于高校各实验室、科研单位的实验场所等。

性能数据/降温曲线

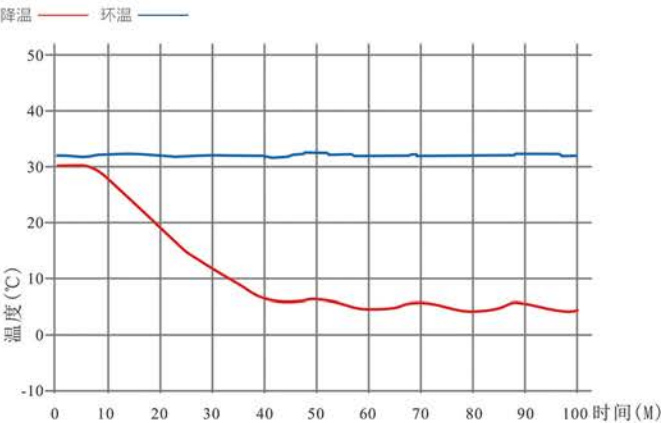

外观尺寸

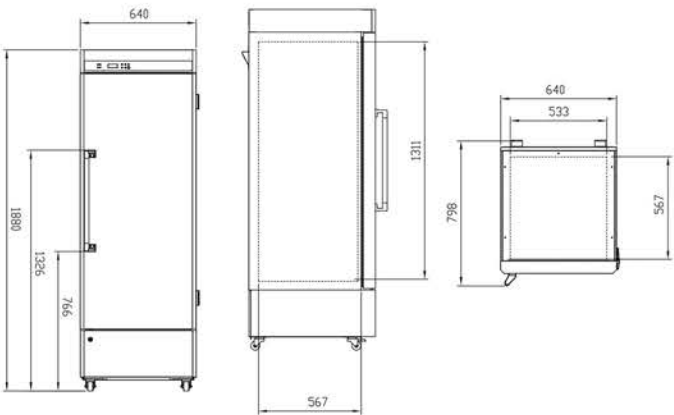

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (kg)
YC-360EL	360	265	2~8℃	640*696*1880	530*565*1312	133

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。