


2~8℃医用冷藏箱

5系精品

7路传感·温度均恒·确保存储安全

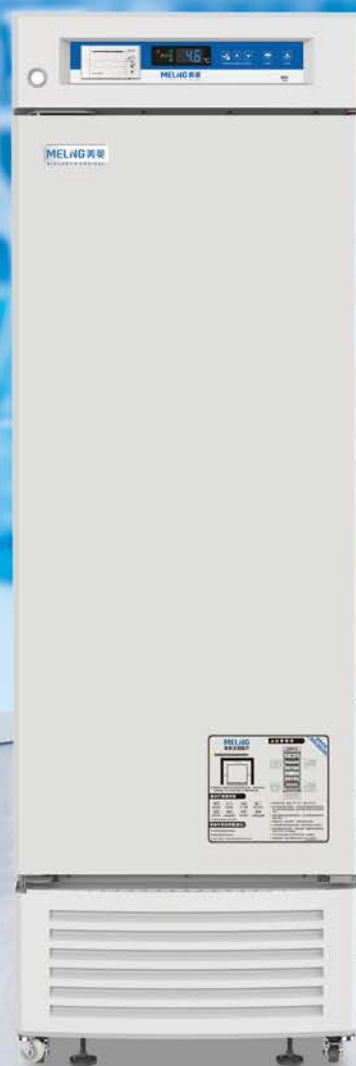

YC - 395EL

-  **真风冷**
涡流多风道制冷系统，翅片式蒸发器，彻底解决结霜烦恼，温度均匀性大幅提升。
-  **真节能**
搭载“M+能量芯”电源管理系统，结合全风冷设计，节能效率提升40%以上。
-  **真保温**
发泡保温门，避光隔热效果好。
-  **真安全**
7路感温探头，温度控制精度高，几近0波动，存储更安全。



官方网站



官方微信

MELNG 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



智能温控

- 高精度微电脑温度控制系统，1英寸高亮度数码温湿度显示，控温精度0.1℃；
- 配备远程报警接入端口，232/485数据接入端口。




安全系统

- 完善的报警系统：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电、高环温、制冷系统故障报警等多种报警功能；
- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；
- 箱体配锁，可加外挂锁。



制冷系统

- 国际知名品牌压缩机，风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速。

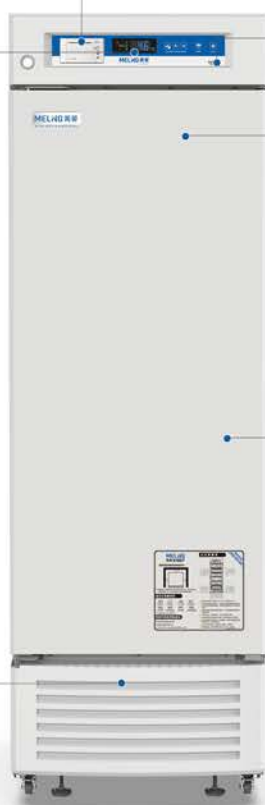

数据存储

- USB导出接口，接入U盘自动存储当月及上月数据，PDF格式。
- U盘持续连接可自动持续存储温度数据(数据存储大于10年)；
- 打印机为选配。



照明系统

- 双LED照明系统，箱体内部一目了然。

人性化设计



- 优质钢丝浸塑搁架，带标签卡，分类标识，且易于清洗；
- 隐藏门把手，整体美观；
- 标配测试孔，方便用户测试箱体内部温度。

适用范围

可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等。适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、卫生所等。

性能数据/降温曲线

外观尺寸

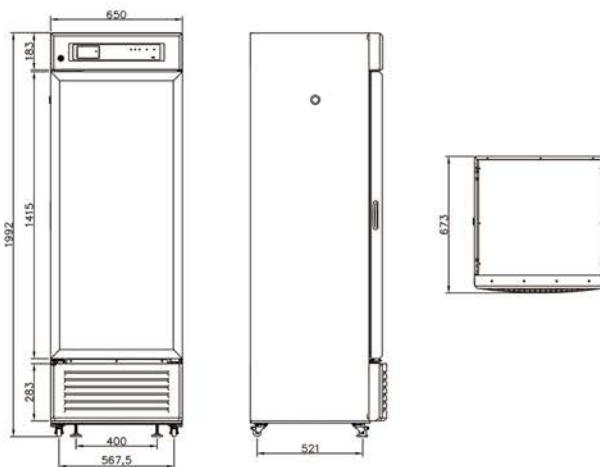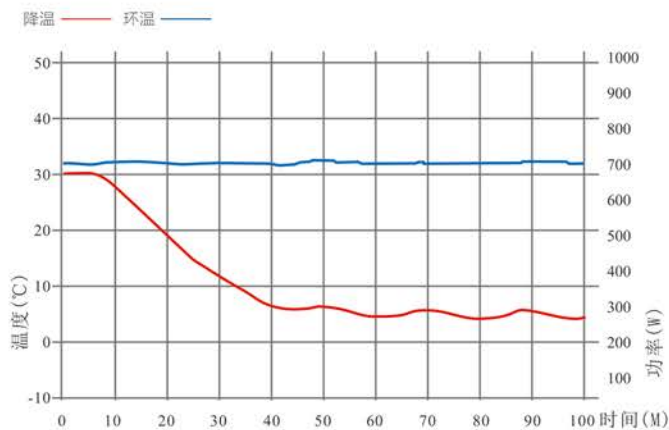

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	搁架数量	净重/毛重 (Kg)
YC-395EL	395	220	2~8℃	650*673*1992	580*533*1352	6+1	89 / 102